

VIGTIGT

Når du starter med at bruge Senso scleral linser, er det vigtigt at du sætter bæretiden af linsen gradvist op således:

Dag 1: 2 timer

Dag 2: 4 timer

Dag 3: 6 timer

Dag 4: 6 timer tag linsen ud, fyld den med nyt saltvand, og tag linsen på igen i 2 timer.

Dag 5: 6 timer tag linsen ud, fyld den med nyt saltvand, og tag linsen på igen i 4 timer.

Fortsæt med at sætte bæretiden op med 2 timer indtil fuld bæretid er nået.

DER ER 2 RENSEPRODUKTER

1. EVERCLEAN: Et brintoverilte system, der anvendes til rensning, desinfektion og opbevaring.

2. SALTVAND: Bruges som isætningsvæske.

Hvis der kommer belægninger på linsen efter noget tid, anbefales det at bruge en separat sæbe til rens.

- Senso scleral linser skal skiftes 1 gang om året.
- Når du kommer til kontrol, skal linsen altid være på øjet.
- Er dit øje irriteret, rødt, gør ondt, eller du føler anden form for ubehag tag da linsen ud og kontakt din optiker.
- Tag altid linsen ud før du fjerner make-up.
- Sov aldrig med dine linser på.
- Brug altid kun det rensesystem din optiker anbefaler.
- Brug aldrig øjenmedicin sammen med dine linser.
- Brug aldrig spyt til at fugte dine linser med.

Hvis du har nogle spørgsmål efter at have læst denne manual, kontakt da din optiker.



SENSO SCLERAL LINSER

BRUGSANVISNING

Læs venligst denne manual før du anvender Senso scleral linser og følg den trin for trin.

HÅNDTERING AF SENSO SCLERAL LINSER

Læs venligst denne manual før du anvender Senso scleral linser og følg den trin for trin.

FORBEREDELSE

For at anvende dine Senso scleral linser på en sikker og komfortabel måde, er det yderst vigtigt at være ekstra opmærksom på hygiejne og korrekt håndtering af linserne.

- Vask altid dine hænder med mild sæbe inden du håndterer linserne. Skyl hænderne grundigt og tør dem i et håndklæde uden skyllemiddel.
- Undgå sæbe der indeholder lanolin, cremer eller parfume.
- Undgå at anvende oliebaseret make-up før du håndterer linserne. Disse stoffer kan sætte sig på overfladen af linserne og føre til dårligt syn eller ukomfortable linser.
- Håndter dine linser med fingerspidserne og undgå at røre linserne med neglene. Vi anbefaler at neglene er korte og glatte.
- Håndter linserne systematisk, så du altid starter med højre linse. Derved undgår du at bytte om på linserne.

ISÆTNING AF LINSEN

1. Sid ned ved et bord med et spejl placeret fladt på bordet foran dig.
2. Sæt altid dine linser på før du bruger make-up.
3. Vær systematisk. Start altid med højre linse.
4. Sæt linsen på den store sugekop og fyld den helt op med Ens eyes Unidose saline.

5. Hold linsen vandret så saltvandet ikke render ud. Læn dig ind over bordet og se direkte ned på spejlet med hagen mod brystet.


6. Træk dit øvre øjenlåg op med venstre hånd.

7. Træk dit nedre øjenlåg ned med højre langfinger.

8. Læg linsen ind på øjet med den nederste kant først. Læg forsigtigt linsen mod øjet og slip øjenlågene.

9. Tag sugekoppen af, ret dig op og blink et par gange.

10. Tjek om du ser godt. Hvis du har sløret syn, kan det skyldes, at der er luftbobler under linsen. Linsen tages ud og isættes igen med nyt saltvand.

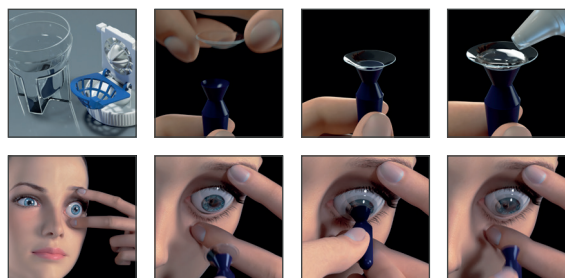


UDTAGNING AF LINSEN

1. Sid ned ved et bord.
2. Vær systematisk. Start altid med højre linse.
3. Træk nederste øjenlåg ned og tryk under linsen 3 gange for at løsne linsen.
4. Brug den lille sugekop til at tage linsen af med.
5. Træk dit øvre øjenlåg op og se ned.
6. Placer sugekoppen på den nederste del af linsen.

7. Lav en drejebælgelse nedad (så du vipper linsen) på der kan komme luft under linsen. Prøv ikke at trække linsen ud ved at sætte sugekoppen midt på!

8. Placer den højre linse i den højre kurv i etuiet og den venstre i den venstre kurv for ikke at bytte om på linserne.

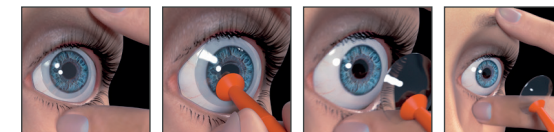

LINSEPLEJE

Senso scleral linser bør altid være opbevaret i EverClean.

- Placer linserne i kurvene og fyld linseetuiet med EverClean op til markeringen på etuiet.
- Put 1 tablet i væsken. Luk etuiet og vend det med bunden op en enkelt gang, for at få desinficeret hele indholdet.
- Stil etuiet på en vandret overflade og tjek at tabletten ligger i bunden af etuiet. Tabletten vil begynde at skumme med det samme.
- Efter 2 timer er væsken blevet gul, og linserne er klar til brug. Hvis væsken ikke er gul, skal du køre hele processen igen. Prøv ikke at tage linserne på hvis væsken ikke er gul.
- Skyl linsen med Ens eyes Unidose saline før den sættes på.
- Der skal anvendes ny væske og tablet hver dag.

