

TÄRKEÄÄ

Kun aloitat skleraalistien Senso-linssien käytön, on tärkeää, että lisäät käyttöaikaa asteittain seuraavasti:

Päivä 1: 2 tuntia

Päivä 2: 4 tuntia

Päivä 3: 6 tuntia

Päivä 4: 6 tuntia, poista linssi ja täytä se puhtaalla suolaliuksella ja laita silmään vielä 2 tunniksi.

Päivä 5: 6 tuntia, poista linssi ja täytä se puhtaalla suolaliuksella ja laita silmään vielä 4 tunniksi.

Jatka käyttöajan lisäämistä 2 tunnilla päivittäin, kunnes olet saavuttanut täyden käyttöajan.

KÄYTÄ KAHTA PIILOLINSSINESTETTÄ

1. EVERCLEAN: Vetyperoksidipohjainen piilolinssineste, jota käytetään linssien puhdistamiseen ja desinfiointiin.

2. SUOLALIUOS: Suolaliuosta käytetään piilolinssien huuhteluun ennen linssin silmään laittamista.

Jos piilolinssihin muodostuu kerrostumia jonkin ajan kuluessa, on suositeltavaa käyttää erillistä puhdistusnestettä.

- Skleraaliset Senso-piilolinssit tulee vaihtaa kerran vuodessa. Piilolinssitarkastukseen tullessasi sinulla tulee olla piilolinssit silmissä.
- Jos silmäsi ovat ärtyneet, punaiset, kipeät tai niissä on muuten epä mukavuuden tunnetta, poista piilolinssit ja ota yhteyttä optikkoosi.
- Poista piilolinssit aina ennen meikin poistamista.
- Älä koskaan nuku piilolinssien kanssa.
- Käytä ainoastaan optikkosi suosittelemia puhdistusnesteitä.
- Älä koskaan käytä lääkesilmätippoja käyttäessäsi piilolinssijä.
- Älä koskaan kostuta piilolinssijäsi syljellä.

Jos sinulla on kysyttävää käyttöohjeiden lukemisen jälkeen, ota yhteyttä optikkoosi.



SKLERAALISET SENSO- PIILOLINSSIT

KÄYTTÖOHJEET

Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin aloitat skleraalistien Senso-piilolinssien käytön ja noudata ohjeita vaihe vaiheelta.

SKLERAALISTEN SENSO-PIILOLINSSIEN KÄSITTELY

Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin aloitat skleraalisten Senso-piilolinssien käytön ja noudata ohjeita vaihe vaiheelta.

ENNEN KÄYTTÖÄ


Jotta skleraaliset Senso-piilolinssit olisivat mahdollisimman mukavat käytössä, on tärkeää, että käsittelet piilolinssijä oikein ja olet erityisen tarkka hygienian kanssa.

- Pese kädet aina miedolla saippualla ennen linssien käsittelyä. Huuhtelee kädet huolellisesti ja kuivaa ne puhtaaseen pyyhkeeseen, joka on pesty ilman huuhteluainetta.
- Vältä saippuaa, joka sisältää lanoliinia, kosteusvoidetta tai hajusteita.
- Vältä öljypohjaisia meikkivoiteita ennen linssien käsittelyä. Öljypohjaiset aineet voivat tarttua linssin pintaan ja aiheuttaa epämukavuuden tunteen sekä sumentaa näköä.
- Käsittele linssijä sormenpäillä ja vältä koskemasta niitä kynsillä. Kynnet on hyvä pitää lyhyinä.
- Huolehdi siitä, että noudatat säännöllisiä rutiineja linssien käsittelyssä. Aloita aina oikealla linssillä. Näin välttyt linssien sekoittumiselta.

PIILOLINSSIN ASETTAMINEN

1. Istu pöydän ääreen ja aseta peili eteesi pöydälle.
2. Laita piilolinssit aina ennen meikkaamista.
3. Toimi aina samassa järjestyksessä. Aloita oikealla linssillä.
4. Aseta linssi suureen imukuppiin ja täytä linssi Ens Eyes Unidose Saline -nesteellä.
5. Pidä linssi vaakasuorassa niin, ettei suolaliuos valu pois. Nojautu hieman eteenpäin ja katso viistosti alas suoraan peiliin. Paina leuka kohti rintaa.


6. Vedä yläluomea ylöspäin vasemmalla kädellä.
7. Vedä alaluomea alaspäin vasemmalla keskisormella.
8. Aseta linssi silmään alareuna edellä. Laita linssi varovasti silmää vasten ja irrota ote silmäluomesta.
9. Poista imukuppi, istu suorassa ja räpäytä silmiä muutaman kerran.
10. Tarkista, että näet hyvin linseillä. Jos näkösi tuntuu sumealta, tämä voi johtua linssin alle jääneistä ilmakuplista. Poista siinä tapauksessa linssi, täytä se suolaliuoksella ja aseta uudelleen silmään.

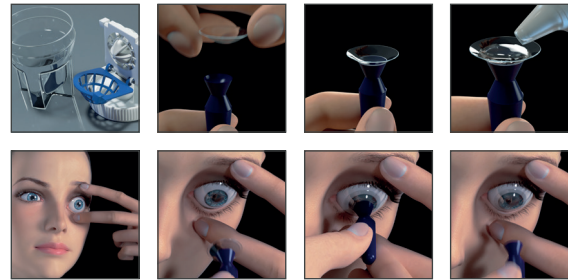

PIILOLINSSIN POISTAMINEN

1. Istu pöydän ääreen.
7. Toimi aina samassa järjestyksessä. Aloita oikealla linssillä.
7. Vedä alaluomea alaspäin ja paina linssin alapuolelta 3 kertaa sen irrottamiseksi.
4. Käytä pientä imukuppia linssin ottamiseksi pois.
5. Vedä yläluomea ylöspäin ja katso alas.
6. Sijoita imukuppi linssin yläosaan.

7. Tee pieni kiertoliike alaspäin (liikauttamalla linssiä), jotta linssin alle pääsee ilmaa. Älä koskaan vedä linssiä pois laittamalla imukupin keskelle linssiä.
8. Laita oikean silmän linssi säilytyskotelon oikealle puolelle ja vasen linssi vasemmalle puolelle, jolloin ne eivät sekoitu.

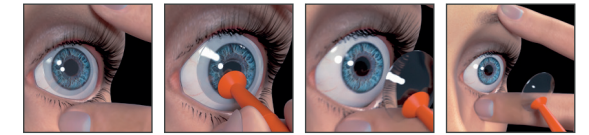

PIILOLINSSIEN HOITO

Skleraaliset Senso-piilolinssit tulee aina säilyttää EverClean-nesteessä.

- Laita linssit koteloon ja täytä se EverClean-nesteellä kotelossa olevaan merkkiin asti.
- Lisää nesteeseen yksi tabletti. Sulje kotelo ja käännä se kerran ylösalaisin, jotta koko sisäpuoli desinfioituu.
- Aseta kotelo vaakasuoralle alustalle ja tarkista, että tabletti on kotelon pohjalla. Tabletti alkaa vaahdota välittömästi.
- 2 tunnin jälkeen neste on muuttunut keltaiseksi ja on valmis käytettäväksi. Jos neste ei ole muuttunut keltaiseksi, älä aseta piilolinssijä silmiin, vaan toista koko prosessi.
- Huuhtelee piilolinssit Ens Eyes Unidose Saline -nesteellä ennen kuin asetat linssit silmiin.
- Vaihda piilolinssineste päivittäin ja käytä uutta tablettia.

